



# DIEL™

## SOLUCIONES DE MEDICIÓN INSTANTÁNEA DE LA TEMPERATURA CORPORAL

Dirección: Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de diciembre  
PBX: +593 (2) 382 7390 /  
WhatsApp: 096 972 9361  
ventas@competencia.com.ec  
serviciotecnico@competencia.com.ec



# Mini detector térmico Diel de temperatura corporal.




Producto nuevo para medir la temperatura corporal cuando las personas caminan cerca. Una herramienta para evitar el brote de enfermedades infecciosas, como el coronavirus. Mini Thermo Detector adopta la tecnología de termometría infrarroja para medir la temperatura de la frente, la muñeca u otra superficie del cuerpo en un segundo cuando las personas caminan cerca, y alarma si supera el valor de temperatura.

El mini detector térmico utiliza la tecnología de detección única de la temperatura de la superficie infrarroja sin contacto del cuerpo humano, se utiliza para detectar la temperatura de la superficie del cuerpo humano a través de un sensor de medición de temperatura de alta precisión. Tiene la función de advertencia de voz de temperatura corporal anormal, que puede prevenir eficazmente la infección de enfermedades a gran escala, que se puede usar solo o ampliamente integrado en el detector de metales, puertas normales, sistemas inteligentes de control de acceso de medición de temperatura, equipos de desinfección y otro equipo que necesita integrar funciones de medición de temperatura.

**“Puede controlar la entrada de personas con fiebre física en lugares públicos y prevenir el brote de enfermedades infecciosas.”**

## Cribado Especificación técnica:

<b>Corriente eléctrica:</b>	AC100V ~ 240V 50 / 60Hz
<b>Potencia:</b>	10W
<b>Entorno de trabajo:</b>	-20°C ~ + 45°C
<b>Peso bruto:</b>	90 kg
<b>Marco exterior:</b>	2220 mm (h) x 820 mm (w) X 522 mm (d)
<b>Marco interior:</b>	2000 mm (h) X 700 mm (w) X 522 mm (d)

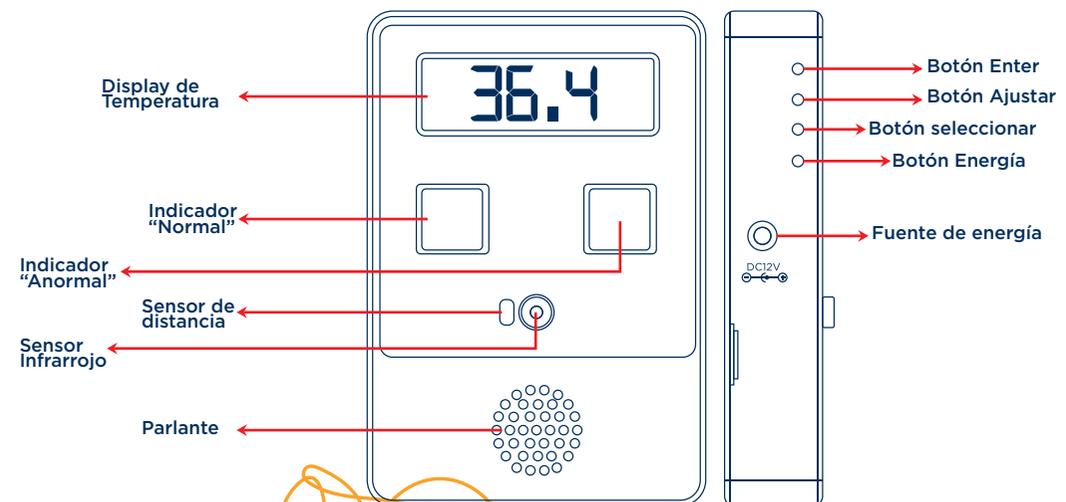

## Funcionalidades:

- Mini tamaño, peso ligero y fácil de instalar.
- Medición de temperatura completa en 1 segundo para garantizar la eficiencia del tráfico..
- Utilice el programa de medición de temperatura de inicio altamente inteligente STM para evitar falsas alarmas causadas por altas temperaturas y la luz solar directa.
- Conexión con Pc (opcional)
- La distancia de medición es de 1-20 cm, no se requiere contacto y se evita la infección. El inspector no necesita.
- Con una pantalla de tubo digital brillante de fuente grande, muestra el resultado de la medición de temperatura.
- Rele para apertura de cerradura

## Característica:

Función de medición de temperatura.

Tráfico inteligente y contadores de alarma que calculan el flujo de tráfico.

Dos barras de luz LED en ambos paneles de la puerta: da la alarma correspondiente a la altura o al cuerpo humano.

Inofensivo para la mujer embarazada y el marcapasos cardíaco

Tecnología avanzada de detección de banda ancha: puede detectar artículos ferrosos y no ferrosos.

Prueba de choque para evitar falsas alarmas.

Alarma sonora y ligera.

El programa operativo está protegido por contraseña.

<b>Peso de envío</b>	Alrededor de 1 kg.
<b>Peso del Producto</b>	0.6kg
<b>El consumo de energía</b>	Menos de 8W.
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10 ~ 40 °C.
<b>Fuente de alimentación externa</b>	CA 100 ~ 240V, 50 / 60Hz.
<b>Tensión de trabajo</b>	12V.
<b>Velocidad de medición de temperatura</b>	Menos de 1 segundo.
<b>Precisión de medición de temperatura</b>	± 0.3
<b>Distancia de medición de temperatura</b>	1-20 cm
<b>Tamaño del producto</b>	164 * 113 * 33 mm mm (sin soporte ni adaptador de corriente)

## Mini detector térmico Diel de temperatura corporal.



## DetECCIÓN RÁPIDA:

Recopile datos de temperatura infrarrojos activamente, no se requiere operación humana, y la medición de temperatura se puede completar rápidamente en menos de 1 segundo..



## MEDICIÓN DE TEMPERATURA SIN CONTACTO:

El sensor de temperatura infrarrojo fijo mide la temperatura de la muñeca o la frente humana para evitar el contacto directo entre el personal de medición de temperatura y la persona medida, lo que puede causar una infección



## ALARMA DE VOZ:

Después de pasar la medición de temperatura, la persona con temperatura anormal será revisada por dos tipos de alarma de voz "Su temperatura es normal" y "Por favor verifique nuevamente" muy rápidamente. Y puede personalizar la voz en diferentes idiomas..



## ENTORNO DE APLICACIÓN:

Los requisitos de temperatura ambiente baja, la medición de temperatura y el cribado se pueden realizar normalmente a -10 °C.



## PANTALLA DEL PANEL:

Pantalla digital de alto brillo, la información del panel es clara..



## FALSA ALARMA ANTI-ALTA TEMPERATURA:

El programa de medición de temperatura altamente inteligente STM puede prevenir falsas alarmas causadas por alta temperatura y luz solar directa.



THERMO  
DETECTOR

**D** I E L <sup>TM</sup>



Dirección: Pasaje N44B E10-26 y Av. 6 de diciembre  
PBX: +593 (2) 382 7390 /  
WhatsApp: 096 972 9361  
ventas@competencia.com.ec  
serviciotecnico@competencia.com.ec



De lejos podrás saber  
con que **temperatura**  
trabajarán hoy

